



Tchibo

Manikür ve pedikür aleti

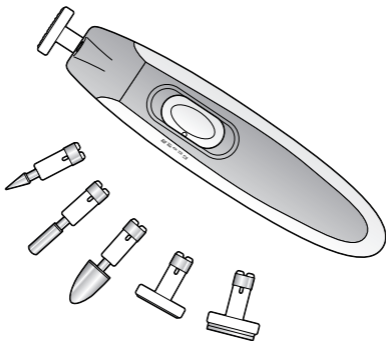

Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 105198ASX6X · 2019-12 · 394 884

Değerli Müşterimiz!

Yeni manikür pedikür aletiniz ile ayak ve el tırnaklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.

Yeni manikür pedikür aletinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 4 Bu kılavuza dair**
- 5 Güvenlik uyarıları**
- 9 Teknik bilgiler**
- 10 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 11 Pilleri yerleştirme**
- 12 Kullanım**
- 13 Tırnak kısaltma ve parlatma**
- 14 Tırnak eti temizleme**
- 15 Nasır temizleme**
- 16 Temizleme ve dezenfekte etme**
- 17 İmha etme**

Bu kılavuza dair

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu cihaz ayak ve el tırnaklarının bakımı için öngörül-müştür. Ürün yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için (örn. kozmetik salonlarında veya medikal ayak bakımı) uygun değildir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- ... Diyabet veya başka cilt problemleriniz varsa. Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.
- ... ürün başkası tarafından kullanılmışsa. Cihaz veya ekli başlıklar sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. tırnak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.
- ... cihazın çalışması sırasında temas edebileceği açık yara bulunan veya iltihaplı tırnakların yakınındaki cilt.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından

gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.
Cihaz bakım gerektirmez.

- Cihaz 8 yaşından küçük çocuklar üzerinde kullanılmalıdır.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/yaralanma UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın. Başlıklar yüksek hızda dönmesinden dolayı ısınır. Yanma tehlikesi vardır!
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, geniş kıyafetlerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen başlığa dolanabilir.
- Cihazda hasar görünüyor ise çalıştırmayın. Eğer bir başlık hasarlı veya çok aşınmış ise bunu daha fazla kullanmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışıklarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihazı nemden koruyun. Suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Pil ve cihazdaki temas yüzeyleri, piller yerleştirilmeden temizlenmelidir. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Daima tüm pilleri aynı anda değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ya da kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/-) dikkat edin.

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.
- LED değiştirilemez ve değiştirilmeye çalışılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model: 394 884

Piller: 2 adet LR03(AAA)/1,5V


Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.




Genel bakış (ambalaj içeriği)

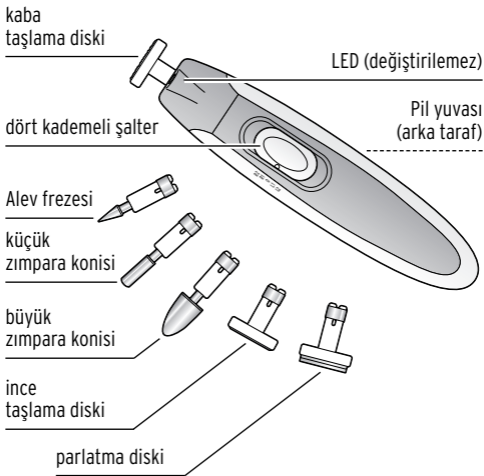

Resimde yer almayan:

- Muhafaza çantası
- 2 adet pil

Pilleri yerleřtirme

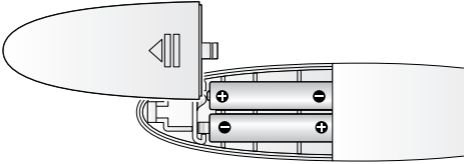


1. Arka taraftaki pil yuvası kapađındaki tırtıklı alana basarak ve kapađı ok yönünde iterek pil yuvasını açın.
2. Pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleřtirin. Bu esnada kutupların (+/-) dođru olmasına dikkat edin.
3. Pil yuvasını kapatın. Kapak duyulur ve hissedilir řekilde yerine oturmalıdır.



Pil deđiřimi sadece uçlar hiř hareket etmediđinde ya da çok yavař hareket ettiđinde gereklidir.

Kullanım

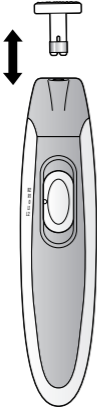

- ▷ Uçları takarak veya çekerek değiştirin.
- ▷ Dört kademeli şalteri ile hızı, çalışma yönünü ve aydınlatma işlevini ayarlayın veya aleti kapatın.

R2 = sağa dönüş hızlı

R1 = sağa dönüş yavaş

0 = kapalı

L1 = sola dönüş yavaş

L2 = sola dönüş hızlı



Her kullanımdan önce uçların tam olarak takılmış olmasına dikkat edilmelidir.



Yaralanma/yanma **UYARISI**

- Uzun saçları hareketli parçalardan uzak tutun.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın.
Başlıklar yüksek hızda dönmesinden dolayı ısınır.


Tırnak kısaltma ve parlatma



Gereksinimler:

Taşılama diskleri ve parlatma diski

Tırnakların çok kısa olmaması için biraz el alışkanlığı gereklidir. Bu nedenle önce yavaş olan hız seviyesinde (şalter 1 konumundan) başlayın.

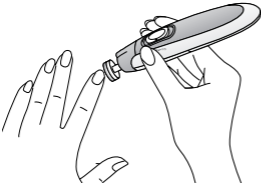

1. El veya ayak tırnaklarınızı taşılama diskleri ile kısaltın ve aynı zamanda şekillendirin.

Bunun için diski daima tırnağın dış tarafından uca doğru hareket ettirin.

Taşılama disklerinin dış kenarları muhafazalı olduğu için yaralanma riski neredeyse sıfırdır.


2. Ardından dairesel hareketlerle tırnak yüzeyini parlatın. Parlatma diskini tek bir nokta üzerinde tutmayın; sürtünme nedeniyle tırnakta aşırı ısınma söz konusu olabilir.

Tırnak eti temizleme



Gereksinimler:

Alev frezesi

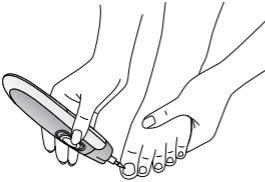

► Tırnak etlerini tırnağın yan tarafından alev frezesi ile temizleyin. Bu özellikle ayak parmakları için gereklidir.

Tırnak etleri, her zamanki gibi önce yumuşatılıp geri itilmelidir.

Bunun için alev frezesi kullanılmamalıdır, aksi halde tırnakta küçük oluklar oluşabilir.

Nasır temizleme




Uygulama öncesinde ayaklarınızı yıkamayın. Yumuşak ciltte cihazın etkisi yoktur. Bu yüzden aleti daima kuru cilt üzerinde kullanın.



Gereksinimler:

Büyük ve küçük zımpara konisi

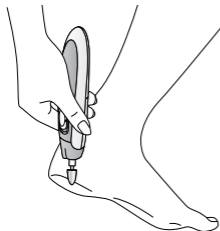

▶ Zımpara konisini kullanmadan önce kalın ve kaba nasırları önceden kesin.

Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.

Temizleme ve dezenfekte etme

- ▷ Kullanılmış ucu cihazdan çıkarın. Zımparalama parçalarını gerektiğinde küçük, yumuşak bir fırça ve eczaneden temin edebileceğiniz etilalkol ile temizleyebilirsiniz.
- ▷ Cihazı her kullanımdan sonra kuru veya su ile nemlendirilmiş bir bezle tırnak tozlarından temizleyin.
- ▷ Cihazı kullanmadığınızda serin, kuru bir yerde ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.