

## Yüz masajı aleti

tr Kullanım Kılavuzu



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

### Değerli müşterimiz!

Yeni yüz masajı aletinizin hem sıcak hem de soğuk uygulama fonksiyonu mevcuttur. Sonik titreşim fonksiyonu her seferinde devreye alınabilir. 42 °C'de yapılan sıcak uygulama; yüzünüzün kan dolaşımını canlandırabilir ve böylece bakım ürünlerinin emilimini kolaylaştırabilir. 6 °C'de yapılan soğuk uygulama; gözenekleri küçültebilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve kırışıklıkları azaltabilir. Sonik titreşim ile bu etkiler daha da güçlendirilebilir. Cildiniz daha pürüzsüz, sıkı ve esnek görünür. Yeni yüz masajı aletinizle keyifli bir vakit geçirmenizi dileriz!

### Tchibo Ekibiniz

#### Güvenlik uyarıları

Bu ürün emniyet tertibatı ile donatılmıştır. Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

#### Kullanım amacı

Cihaz, yüze sıcak ve soğuk uygulama ve yüz masajı için kullanılır. Ürün yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır, ticari kullanıma (örneğin güzellik salonları veya benzeri tesislerde) uygun değildir.

Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın.

#### Cihazı şu durumlarda kullanmayın:

... açık yara, yanık veya tahrişi ya da cilt hastalıkları olması durumunda,

... kan dolaşımı bozuklukları, diyabet, tüberküloz, tümör, çürük, trigeminal nevralji halinde,

... ameliyat sonrasında,

... hamilelikte,

... kalp pili takıyorsanız,

... nedeni bilinmeyen ağrı olması durumunda. Şüpheye düşerseniz, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

• Cihazı doğrudan göz çevresinde kullanmayın. Bu bölgeyi atlayın.

• Ürün, sıcaklığı veya soğukluğu tam algılayamayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Diyabet gibi belirli hastalıklar, sıcaklık algılama sorunlarına sebep olabilir. Engelli veya hasta kişiler, rahatsızlık duyduklarını belli edemeyebilirler. Bu nedenle cihazı yardıma muhtaç kişilerde, hastalarda ve soğuk ya da sıcaklığa karşı hassas kişilerde kullanmayın.

• 42 °C üzerindeki sıcaklıklara yanıklara sebep olabilir! Bu nedenle yüz masajı aletini, sıcak uygulama fonksiyonu açıkken tek bir yerde uzun süre tutmayın.

#### Elektronik cihaz, çocuklar ve kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler için tehlikelidir.

• Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır. 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

• Ciltleri çok hassas olduğundan, bu cihaz küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Temizlik ve bakımını, yalnızca denetlendikleri durumlarda çocuklar tarafından yapılabilir.

#### Elektrik nedeniyle tehlike

• Cihaz yalnızca kuru iç mekanlarda şarj edilebilir. Şarj etmek için sadece "Teknik Bilgiler" bölümünde belirtilene uyan bir USB elektrik adaptörü kullanın.

• Su bulunan alanların yakınında şarj etmeyin. Cihaz elektrik şebekesine bağlıyken, su veya başka sıvılarla temas etmemelidir. Şarj işlemi sırasında cihazı su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur.

• Uyarı - Cihazı küvet, duş lavabo veya su dolu başka bir kap yanında şarj etmeyin.

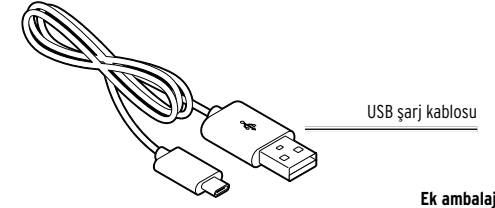
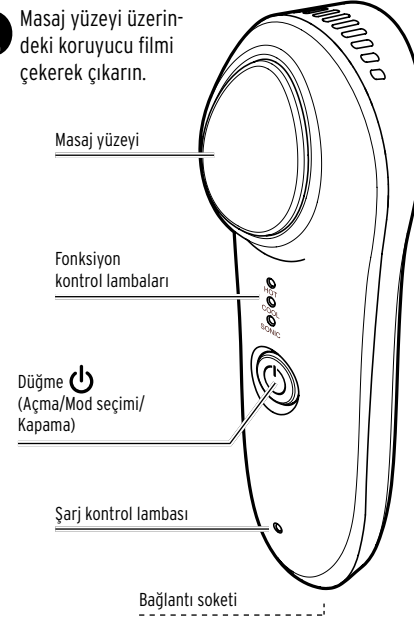
• Cihaz şarj sırasında suya düşerse, çıkarmaya çalışmayın! Derhal elektrik adaptörünü prizden veya USB fişini bağlantı soketinden çıkarın. Tekrar bağlamadan önce cihazı, bağlantı kablosunu ve elektrik adaptörünü kurumaya bırakın.

• Şarj için cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış, şebeke gerilimi elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu olan bir prize takın.

### Genel bakış

#### (Ambalaj içeriği)

• Masaj yüzeyi üzerindeki koruyucu filmi çekerek çıkarın.



USB şarj kablosu

**Ek ambalaj içeriği**  
(resimde yer almamaktadır):  
Saklama torbası

#### Kullanılan şarjlı pil hakkında ek bilgiler:

Üretici: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China

Marka: LMT  
Web sitesi: <http://lmtzkj.1688.com>  
E-posta: 335687086@qq.com

• Şarj sırasında arıza meydana gelirse, cihaz tamamen şarj olduğunda, fırtına mevcutsa veya cihaz temizliğinden önce elektrik adaptörünü prizden çekin. USB şarj kablosundan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çıkarın.

• Arızalı bir USB elektrik adaptörü kullanmayın ve onarmaya çalışmayın.

• Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB şarj kablosunu, yanlışlıkla çekilip cihazın düşmesine sebep olmayacak şekilde yerleştirin.

• Dahili şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pillerin uygunsuz şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında lütfen yetkili bir servise başvurun.

• Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bu pil parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

• Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

• USB şarj kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Kablo sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.

• Cihazın kendisinde veya USB şarj kablosunda herhangi bir görünür hasar meydana geldiği veya cihaz yere düştüğü takdirde, cihazı çalıştırmayın ya da şarj etmek için elektrik şebekesine bağlamayın.

• Cihazı, kullanım kılavuzunda tarif edilenden daha fazla parçaya ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazdaki veya USB şarj kablosundaki onarım çalışmalarını sadece yetkili bir serviste yaptırın.

#### Yanma/patlama tehlikesi

• Aşırı sıcaklıklarda ve aşırı düşük hava basıncında depolamaktan, şarj etmekten ve kullanmaktan kaçının (örn. çok yükseklerde).

• Cihazı darbelerden, düşmekten, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneş ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun. Özellikle şarjlı pil aşırı sıcaktan korunmalıdır.

#### Maddi hasarlar

• Yağ kalıntılarını ve diğer kalıntıları önlemek için her kullanımdan sonra masaj yüzeyini "Cihazı temizleme" bölümünde açıklandığı gibi iyice silin.

• Tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanmayın. Temizlerken cihazın içine nem girmemesine dikkat edin.

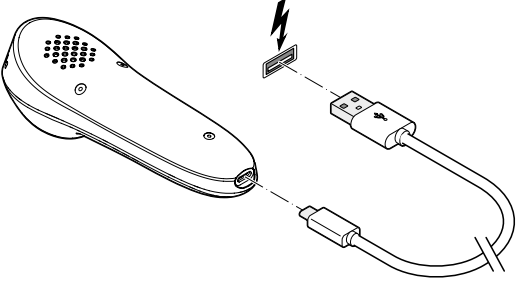
## Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar şarj edilmiş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.



**UYARI** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.



1. USB şarj kablosunu cihaza ve bir USB elektrik adaptörüne (ambalaj içeriğinde mevcut değildir) bağlayın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Şarj kontrol lambası, şarj işlemi süresince kırmızı yanar.

Şarjlı pili yaklaşık 2 ila 3 saat süresince tamamen şarj edin.

Şarjlı pil tam dolunca, şarj kontrol lambası mavi yanar.

3. Şarj işleminden sonra, elektrik adaptörünü prizden çıkarın ve USB şarj kablosunu cihazdan çıkarın. Şarj kontrol lambası söner.

Yüz masajı aleti artık kullanıma hazırdır.

Tam dolu şarjlı pil ile cihazı yaklaşık 45 dakika kullanabilirsiniz. Ardından şarjlı pil yeniden yaklaşık 2 ila 3 saat şarj edilmelidir.



- Şarjlı pil şarj olurken cihazı kullanamazsınız.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlar dahil olmak üzere şarjlı pil 2 ila 3 ayda bir şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 °C ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

## Kullanım



**UYARI** - Yaralanma tehlikesi

- 42 °C üzerindeki sıcaklıklar yanıklara sebep olabilir! Bu nedenle sıcak uygulama fonksiyonu açıkken yüz masajı aletini tek bir yerde uzun süre tutmayın.

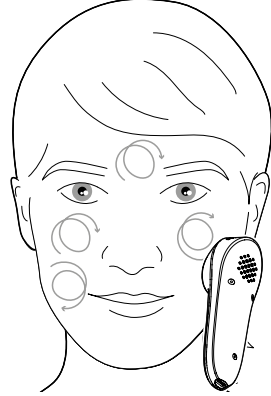


- Olası reaksiyonları azaltmak için yüz masajı aletini başlangıçta sadece kısa süre kullanın.
- Yüze yapılan uygulama 5 dakikayı geçmemelidir. Yüz masajı aleti yaklaşık 2,5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Cihazı günde en fazla 2 kere kullanın.
- Yüzünüzde makyaj varsa, sıcak uygulama veya sıcak uygulamayla birlikte sonik titreşim kullanmayın. Ciltte makyaj (fondöten, pudra, kapatıcı vb.) varsa, ısı nedeniyle bu makyaj hafifçe sıvılaşır. Üzerine

yapılacak sıcak uygulama; makyaj kalıntıları, yağ ve kir karışımını genişlemiş gözeneklerin derinliklerine iter. Bunun sonucunda gözenekler tıkanır ve siyah nokta ve sivilce oluşumuna sebep olabilir.

- Hassas ciltli kişilerde ciltte şişlik ve tahriş oluşabilir. Gerekirse cihazı önce kolun alt kısmı gibi daha az hassas bir bölgede deneyin.

1. Öncelikle makyaj kalıntılarını, kiri ve yağ fazlasını gidermek amacıyla yüzünüzü iyice temizleyin. Yüzünüzü iyi bir şekilde kurulaşın.
2. Kaliteli bir serum, yüz yağı veya nemlendirici uygulayın. Bu, cihazın cilt üzerinde nazik biçimde kaymasını ve değerli etken maddelerin cilt tarafından etkili bir şekilde emilmesini sağlar.



3. Sıcak uygulama ve gerekirse ek olarak sonik titreşim fonksiyonunu (bkz. "Açma/Kapama/Değiştirme" bölümü) kendinizi hangisinde rahat hissederseniz, açın ve cihazın masaj yüzeyini yüzünüzün ortasından kenarlarına doğru dairesel hareketlerle gezdirin.
4. Şimdi soğuk uygulama ve gerekirse ek olarak sonik titreşim fonksiyonunu açın ve masaj yüzeyini yüzünüzün ortasından kenarlarına doğru dairesel hareketlerle gezdirin.

Ardından istediğiniz gibi makyaj yapabilirsiniz.

### Kullanım sonrası

- ▷ Cihazı, özellikle de masaj yüzeyini, her kullanımdan sonra "Temizleme" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

## Açma/Kapama/Değiştirme



- Fonksiyonlar düğmesine kısa süre basılarak aşağıdaki sırayla ayarlanabilir:  
Sıcak -> Sıcak + Sonik titreşim fonksiyonu -> Soğuk -> Soğuk + Sonik titreşim fonksiyonu

### Cihazı açma

#### Sıcak fonksiyonu (42 °C)

42°C'de yapılan sıcak uygulama; yüzünüzün kan dolaşımını canlandırabilir, gözenekleri açabilir ve etken madde emilimini artırabilir.

- ▷ Yüz masajı aletini açmak için düğmesine basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. HOT kontrol lambası kırmızı yanar. Masaj yüzeyi 3 saniye sonra ısınır ve kullanıma hazır hale gelir.

### Sıcak uygulama ve sonik titreşim fonksiyonunu birlikte kullanma

- Sonik titreşim fonksiyonu cilde masaj yapar ve cildi rahatlatır.
  - ▷ Sıcak fonksiyonuna ek olarak sonik titreşim fonksiyonunu da açmak için düğmesine yeniden basın. HOT kontrol lambası kırmızı yanar, SONIC kontrol lambası sarı yanar. Masaj yüzeyi sıcaktır ve titreşir.

### Soğuk fonksiyonu (6 °C)

6°C'de yapılan soğuk uygulama; gözenekleri küçültebilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve kırışıklıklarla şişlikleri azaltabilir.

- ▷ Soğuk fonksiyonunu açmak için düğmesine yeniden basın. COOL kontrol lambası mavi yanar. Masaj yüzeyi 3 saniye sonra soğur ve kullanıma hazır hale gelir.

### Soğuk uygulama ve sonik titreşim fonksiyonunu birlikte kullanma

- ▷ Soğuk fonksiyonuna ek olarak sonik titreşim fonksiyonunu da açmak için düğmesine yeniden basın. COOL kontrol lambası mavi yanar, SONIC kontrol lambası sarı yanar. Masaj yüzeyi soğuktur ve titreşir.

### Cihazı kapatma

- En son hangi fonksiyonu ayarladığınızdan bağımsız olarak, yüz masajı aletinizi her zaman kapatabilirsiniz.
  - ▷ Yüz masajı aletini kapatmak için düğmesine basın ve 3 sn boyunca basılı tutun.

### Otomatik kapanma

Yüz masajı aleti yaklaşık 2,5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

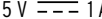

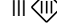
## Temizleme ve saklama

### UYARI - Maddi hasarlar

- Yüz masajı aleti suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır. Cihazın içine nem girmesini önleyin.
- Temizlik için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- ▷ Temizlemeden önce daima cihazı kapatın.
- ▷ Masaj yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Cihazın içine nem girmemesine dikkat edin.
- ▷ Gerektiğinde gövdeyi yumuşak, nemli bir bezle silin.
- ▷ Cihazı kaldırmadan önce gerekirse şarjlı pili yeniden şarj edin. Böylelikle sonraki seferde hemen kullanılabilir.
- ▷ Cihazı, ambalaj içeriğinde yer alan saklama torbasında, çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde saklayın.

## Teknik Bilgiler

Model:	717 936
Giriş:	5 V  1 A (bu işaret  doğru akımın göstergesidir)
Şarjlı pil:	Lityum iyon şarjlı pil, 3,7 V 800 mAh Anma gerilimi: 2,96 Wh (UN 38.3 uyarınca test edildi) (değiştirilemez)
Şarj süresi:	yakl. 2-3 saat
Maks. çalışma süresi (şarjlı pil tam dolu iken):	yakl. 45 dakika
Koruma sınıfı:	III 
Kapalı durumdaki güç tüketimi:	0,2 W
Elektrik adaptörü (dahil değildir):	Giriş: AC 100-240 V 50/60 Hz Çıkış: DC 5 V 1 A
Ortam sıcaklığı:	+10 ile +40°C arası
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kâğıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi, çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller, yerel yönetim veya belediyeniz tarafından işletilen bir toplama noktasına veya bir pil şirketine verilmelidir. İmha etmeden önce, lityum pillerin ve şarjlı pillerin kontaklarını bantlayın. **Dikkat!** Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit şekilde takılmış ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak bir şarjlı pil bulunmaktadır. Uygun olmayan şekilde sökülmesi güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.