


## Genel bakış (ambalaj içeriği)



### ayarlanabilir ısı seviyeleri:

- 1 = maksimum ısı seviyesi yakl. 55 °C = kırmızı
- 2 = orta ısı seviyesi yakl. 50 °C = yeşil
- 3 = minimum ısı seviyesi yakl. 45 °C = mavi

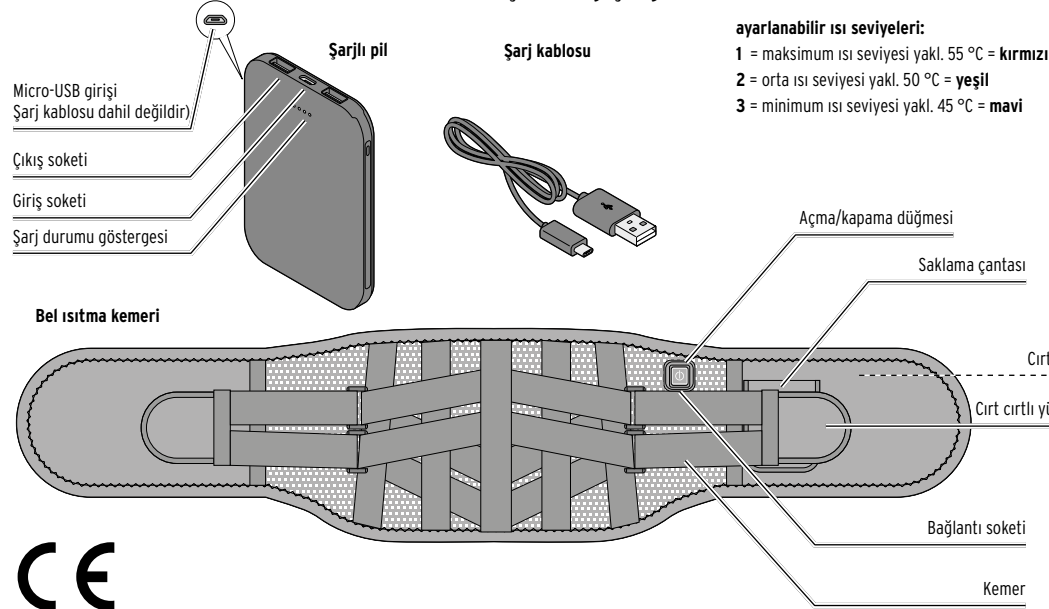

## Değerli müşterimiz!

Yeni bel ısıtma kemerinizin verdiği ısı, gergin olduğunuzda veya yalnızca ısınıp rahatlamak istediğinizde size iyi gelecektir.

Şarjlı pil sayesinde hareket özgürlüğünüz maksimum düzeydedir. Bel ısıtma kemerini kıyafetlerinizin altına da takabilirsiniz. Ancak direkt cilt üzerinde doğrudan kullanmayın.

## Tchibo Ekibiniz

Bu ürün, güç tüketimi düşük seviyede olan esnek bir ısıtma cihazıdır. Isınması için yaklaşık 15-20 dakika süre gerekmektedir. Sıcaklığı kontrol etmek istediğinizde, elinizle ılık olarak algıladığımız bir sıcaklığın vücut yüzeyinde sıcak olarak algılanabileceğini unutmayın.

## Bu kılavuza dair

Bu üründe çeşitli emniyet tertibatları bulunmaktadır. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuza saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir. Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu kullanım kılavuzundaki işaret sözcükleri:

**TEHLİKE** Doğrudan ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

**UYARI** Olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

**BİLGİ** Olası maddi hasarlara karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

## Bel ısıtma kemerinin üzerinde yer alan ve dikkat edilmesi gereken işaretler


Bilgileri ve kullanım kılavuzunu okuyun

İğne veya benzeri aletlerle delmeyin

Katlanmış veya sıkıştırılmış şekilde kullanmayın

3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir

Yıkamayın

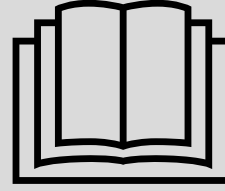

# Talimatları okuyun!

## Önemli bilgiler içermektedir, daha sonra da ihtiyaç duyabileceğiniz için saklayın!



Ağartmayın



Ütülemeyin



Kimyasal temizlik yapmayın



Kurutma makinesinde kurutmayın

## Güvenliğiniz için

### Kullanım amacı

Bel ısıtma kemeri, bu kılavuzda belirtilen şekilde evde kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün hastanelerde, muayenehanelerde kullanmaya uygun değildir.

Bel ısıtma kemeri, "Çocuklar ve cihazları kullanma becerisi kısıtlı kişiler için tehlike" bölümündeki güvenlik talimatlarına uyulması koşuluyla çocuklar tarafından da kullanılabilir. Ancak, kemerin çocuk vücuduna uygun olarak tasarlanmadığını ve bu nedenle 18 yaşından büyük kişilerin kullanımını tavsiye ettiğimizi lütfen unutmayın.

Bel ısıtma kemeri tıbbi bir cihaz değildir.

### Elektronik cihaz çocuklar ve kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler için tehlikelidir.

• Bu cihaz, 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılamaz; çünkü bu yaş grubundaki çocuklar aşırı ısınmaya karşı tepki veremez.

• 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ise cihazı yalnızca kullanım süresi boyunca sürekli olarak bir ebeveyn ya da yetişkinin gözetiminde olmaları ve cihazın her zaman en düşük ısı seviyesinde, minimum sıcaklıkta ayarlanmış olması koşuluyla kullanabilirler.

• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

• Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır.

• Temizlik ve bakım, yalnızca denetlendikleri durumlarda çocuklar tarafından yapılabilir.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### Kalp pili olanlar için hayati tehlike

• Bu elektrikli ürünün yaydığı elektromanyetik alanlar, bazı durumlarda kalp pilinizin çalışmasını etkileyebilir. Ancak söz konusu elektromanyetik alanlar, yasal sınırların oldukça altındadır. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve kalp pilinizin üreticisine danışmanız önerilir.

### Bel ısıtma kemerini aşağıdaki durumlar söz konusuysa kullanmayın:

... Isıyı doğru şekilde algılayamayan kişiler. Küçük çocuklar ısıya karşı daha hassastır. Bazı ilaçların kullanımı veya diyabet gibi hastalıklar, ısı algısında bozulmalara yol açabilir. Engelli ya da güçsüz kişiler, kendilerini rahatsız hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler.

... 3 yaşın altındaki çocuklar, bakıma muhtaç, hasta veya ısıya karşı duysuz kişiler.

... Evcil hayvanlar veya diğer hayvanlar.

Emin olmadığımız durumlarda veya dolaşım sistemi rahatsızlıkları söz konusuysa, ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Kullanım sırasında kendinizi kötü hissederseniz ya da herhangi bir rahatsızlık olursa, ürünü kullanmayı derhal bırakın. Gerekirse bir doktora başvurun.

### Nem nedeniyle elektrik çarpması riski

- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle ürünü, şarjlı pili ve şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Ürünü açık havada veya nem oranı yüksek alanlarda şarj etmeyin.
- Şarjlı pili banyoda, lavabo yanında veya sıvı dolu kapların (vazo gibi) yanında şarj etmeyin.

### Elektrik nedeniyle tehlike

- Şarj etmek için ürünü sadece teknik bilgilerde belirtilenlere uyumlu olup bağlantısı doğru yapılmış bir prize takın.
- Şarj etmek için yalnızca uygun elektrik adaptörleri kullanın (bkz. "Teknik Bilgiler").
- Arızalı bir elektrik adaptörü kullanmayın ve bunları onarmaya çalışmayın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Şarj kablosunu, takılmaları neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Çalışma sırasında arıza meydana gelirse, fırtınalı havalarda ve ürünü temizlemeden önce elektrik adaptörünü prizden çekin. Şarj kablosundan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çıkarın.
- Bel ısıtma kemerine iğne, çengelli iğne gibi sivri cisimler batırmayın.
- Ürün ve şarj kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Ürünün parçaları gözle görülür şekilde hasar görmüşse veya şarjlı pil düşürülmüşse, ürünü kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan onarımlar, kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

### Yangın/patlama tehlikesi

- Ürünün yakınlarında sprey şişeli ürünler kullanmayın. En kötü durumda sprey alev alabilir.

• Üründe belli noktalarda aşırı ısınma ve hasar oluşmasını önlemek için, ürünü sadece tamamen açılmış şekilde kullanın. Ürün ikiye katlanmış veya buruşturulmuş şekilde ya da bükülmüş olarak kullanılmamalıdır.

• Üründe termal bir anahtar bulunmaktadır. Bu şalter aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Şalter kapandığında, kemeri tekrar açmadan önce oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

• Kullanım sırasında uyumamaya dikkat edin. Çok yorgunsanız veya ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayı planlıyorsanız, güvenlik açısından en düşük ısı ayarını seçin.

• Bel ısıtma kemerini yalnızca ambalaj içeriğinde yer alan şarjlı pille kullanın. Şarjlı pili sadece bel ısıtma kemeriyle birlikte kullanın.

• Şarjlı pil şarj işlemi süresince ısınır. Şarj işlemi sırasında şarjlı pilin üzerini örtmeyin.

#### Yanık tehlikesi

• Uzun süre en yüksek ısı seviyesinde kullanmak cilt tahrişine ve yanıklara sebep olabilir. Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayı planlıyorsanız, güvenlik açısından en düşük ısı ayarını seçin.

• Cilt tahrişlerini önlemek için kullanmadan önce sıcaklığı elinizle tersiyle test edin (elinizin iç yüzeyini kullanmayın, çünkü bu bölge vücudun diğer yerlerine göre daha az hassastır).

• Ürünü doğrudan ıslak cilt üzerinde kullanmayın. Ürünü, altında en az bir kat giysi olacak şekilde kullanın.

#### Maddî hasarlar

• Bu ürün zamanla yıpranır. Bu nedenle her kullanımdan önce, üründe aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Bu tür belirtiler mevcutsa ürünü tekrar kullanmadan önce yetkili bir serviste kontrol ettirin.

• Her tür sivri ve keskin nesneyi (örn. takıkemere tokası vb.) üründen uzak tutun.

• Ürünü her zaman kuru, serin yerlerde ve diğer ısı kaynaklarından uzakta muhafaza edin. Ürünün üzerine ağır nesnelere koymayın.

• Temizlik için keskin kimyasallar, agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

#### Şarjlı pil ile ilgili bilgiler:

• Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bu pil parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

• Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Şarjlı pili boşaltmak için zorlamayın.

• Şarjlı pili çocukların erişebileceği yerlerde tutmayın.

• Şarjlı pili parçalamaya veya yeniden birleştirmeye çalışmayın.


• Şarjlı pili "İmha etme" bölümünde belirtilenlere uygun şekilde imha edin.

## Kullanım

### Şarjlı pili şarj etme

Her kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

1. Şarjlı pili, bel ısıtma kemerinin saklama cebinden çıkarın.

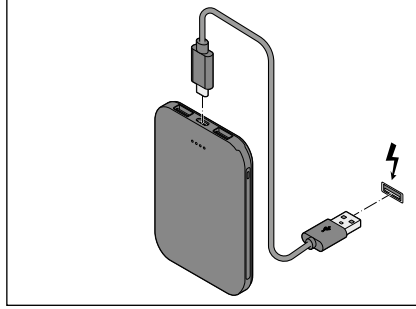

2. Ambalaj içeriğindeki şarj kablosunun küçük fişini, şarjlı pilin giriş soketine takın.

3. Şarj kablosunun büyük fişini ise uygun bir USB adaptörüne (ambalaj içeriğine dahil değildir, bkz. "Teknik bilgiler") takın.

4. Elektrik adaptörünü prize takın.

Şarj durumu göstergesi şarjlı pilin şarj durumunu gösterir:

•••• % 25

••••• % 50

••••• % 75

••••• % 100

LED kapalı: = Kapasite boşaldı

LED yanıp sönüyor = şarj ediliyor

LED sürekli yanıyor = şarj tamamlandı

Şarjlı pil tamamen dolunca 4 LED de yanar.

Şarj süresi: maks. 4 saat (2 A'da)

Çalışma süresi (şarjlı pil tamamen dolu iken):

En yüksek seviyede yaklaşık 2 saat.

• Şarj kablosu şarjlı pilden çıkarıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra LED'ler söner.


5. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda, USB adaptörünü prizden çekin ve şarj kablosunu şarjlı pilden çıkarın.

6. Şarjlı pili tekrar bel ısıtma kemerinin saklama cebine yerleştirin.

• Ürün uzun süre kullanılmadıysa, şarjlı pil cihazı çalıştırmayacak kadar boşalmış olabilir. Bu durumda, şarjlı pilinizi "Şarjlı pili şarj etme" bölümünde anlatıldığı gibi şarj etmeniz gerekir.

## Bel ısıtma kemerini takma ve açma


1. Kullanmadan önce, kitapçığın önceki bölümlerinde yer alan "Güvenlik uyarıları" başlığını dikkatlice okuyun. Cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için dikkat etmeniz gereken bilgileri o bölümde bulabilirsiniz.

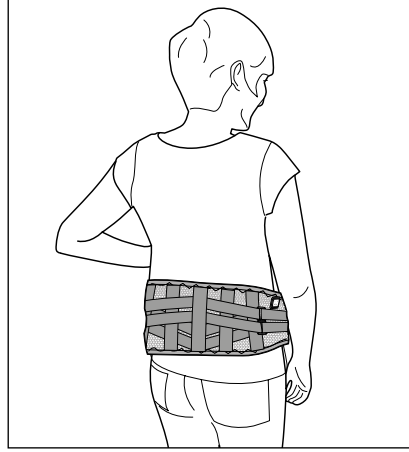


2. Bel ısıtma kemerini belinizin alt kısmına yerleştirin.

Şalter ve şarjlı pil saklama cebi yukarıyı göstermelidir.

Bel ısıtma kemerini cırt cırtlı bantla, yerinden kaymayacak ancak rahat olacak şekilde, vücudunuzu sıkıştırmadan sabitleyin.

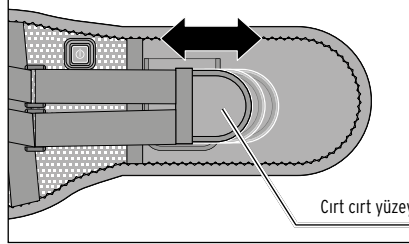

► Kayışlardaki cırt cırtları açıp istediğiniz konumda tekrar yapıpıştırarak kemer genişliğini ayarlayabilirsiniz.

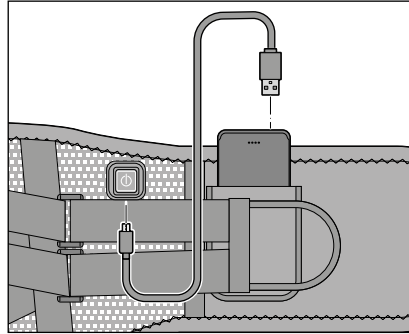

3. Resimde gösterildiği gibi şarj kablosunu, şarjlı pilin çıkış soketine ve bel ısıtma kemerinin bağlantı soketine takın.

Açma/kapama düğmesindeki kontrol ışığı kırmızı, yeşil ve mavi renklerde dönüşümlü olarak yanar.

4. Şarjlı pili, saklama cebine yerleştirin.

5. Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine basın.



Açma/kapama düğmesindeki kontrol ışığı kırmızı yanar.

6. Isı seviyelerini değiştirmek için açma/kapama düğmesine basın.

Düğmedeki kontrol ışığı farklı seviyelerde şöyle yanar:

... en yüksek seviyede kırmızı (yakl. **55 °C**),

... orta seviyede yeşil (yakl. **45 °C**),

... en düşük seviyede mavi (yakl. **45 °C**).

Öncelikle kırmızı ısı seviyesini seçin.

Yaklaşık 15-20 dakika sonra bel ısıtma kemeri maksimum sıcaklığa ulaşır. Şimdi daha düşük bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

7. Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine bir kez daha basın.

• Bel ısıtma kemerinin aşırı ısınmaya karşı koruması vardır ve yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Kemeri yeniden açmadan önce, şarjlı pili ve bel ısıtma kemerini oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

## Temizleme ve saklama



**UYARI** - Yaralanma tehlikesi

Bel ısıtma kemerini temizlemeden önce, şarjlı pili kemerden mutlaka çıkarın. Aksi takdirde şarjlı pil hasar görebilir. Patlama riski oluşur.



**TEHLİKE** - Elektrik

Ürünü, şarjlı pili ve şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara batırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi vardır.

1. Kullanımdan sonra bel ısıtma kemerini temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.

2. Hafifçe nemlendirilmiş, tüy bırakmayan bir bezle silin.

3. Tekrar kullanmadan veya kaldırmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

#### Saklama

► Bel ısıtma kemerini katlamadan önce soğumasını/kurumasını bekleyin.

► Bel ısıtma kemerinin üzerine ağır nesnelere koymayın. Üzerinde kırışıklık oluşmamasına dikkat edin.

► Bel ısıtma kemeri her zaman kuru, serin yerlerde saklanmalı ve diğer ısı kaynaklarından uzakta muhafaza edilmelidir.

## Teknik Bilgiler

Model:	727 230
Şarjlı pil:	Lityum iyon şarjlı pil 3,7 V/ 5000 mAh Anma gerilimi: 18,5 Wh (UN 38.3 uyarınca test edildi) (değiştirilemez)
Giriş:	5 V --- 2 A
Çıkış:	5 V --- 2 A (Bu sembol --- doğru akımın göstergesidir)
Güç:	10 W
Koruma sınıfı:	III
Şarj süresi:	maks. 4 saat

Çalışma süresi (şarjlı pil tamamen dolu iken): en yüksek seviyede yaklaşık 2 saat

Kapalı durumda elektrik tüketimi: ≤ 0,3 W

Elektrik adaptörü (dahil değildir):  
Giriş: AC 100-240 V 50/60 Hz  
Çıkış: DC 5 V 2,0 A  
Üst malzeme: %70 Polyester, %30 Elastodien  
ALT malzeme: %95 Polyester, %5 Elastan  
Ortam sıcaklığı: +10 ile +40°C arası

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

## Arıza/Çözüm

### Cihaz çalışmıyor

Şarjlı pil boş mu?

• Şarjlı pili "Kullanım" bölümünde, "Şarjlı pili şarj etme" başlığında belirtildiği şekilde şarj edin.

• Şarj kablosunun bağlantı fişlerinin, pilin çıkış soketine ve bel ısıtma kemerinin bağlantı soketine sağlam şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

• Bel ısıtma kemerinin kapanma sebebi, termal anahtarın devreye girmesi olabilir. Şarjlı pili bel ısıtma kemerinden çıkarın. Şarjlı pili tekrar takıp ürünü açmadan önce, kemerin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin. Ürün yine çalışmıyorsa, yetkili bir servise başvurun.

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve ürüne dahil şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kâğıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

**Bu sembolle işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöplünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş piller ve şarjlı piller, yerel yönetim veya belediyeniz tarafından işletilen bir toplama noktasına veya bir pil şirketine verilmelidir. Bertaraf etmeden önce, lityum pillerin ve şarjlı pillerin kontaklarını bantlayın.

## Ürün numarası: 727 230

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr