


Değerli Müşterimiz!

Yeni nasır temizleyiciniz aşırı kuru, pürüzlü ve nasırın oluştuğu deriyi temizler. Böylelikle bakımlı ve mükemmel yumuşak ayaklara kavuşmanıza yardımcı olur. Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.

Yeni nasır temizleyicinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Genel bakış (ambalaj içeriği)

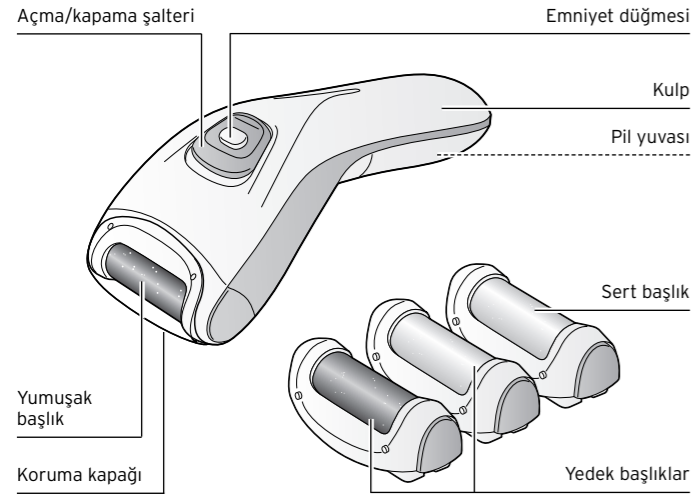

Diğer ambalaj içeriği (resimsiz):
2 adet pil LR6

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Cihaz, ayaklardaki nasırlı tabakayı temizlemek için tasarlanmıştır. Bu ürün kişisel kullanım için tasarlanmış olup, özellikle medikal ayak bakımı ve ticari amaçlar için uygun değildir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

... Diyabet veya başka cilt problemlerinizi varsa. Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.

... Kızarmış, yaralı veya yanık cilt üzerinde. Üzerinde nasırın bulunmadığı doğum lekesi, siğil ve diğer cilt anormallikleri gibi cilt yüzeylerine ürünü kullanmayın.

... Ürün başkası tarafından kullanılmıyorsa. Cihaz veya ekli başlıklar sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. ayak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Çocuklar için TEHLİKE

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

• Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve

... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece

... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve

... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

• Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

• Bu cihaz çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.

Yangın/yaralanma UYARISI

• Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
• Dönen silindirin bir yerle temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ısı oluşumuna yol açar.
• Cihaz çalışır haldeyken uzun saçları hareketli başlıktan uzak tutun.

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoz bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Cihazı tozdan, kirden ve nemden koruyun. Asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.

• Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Daima tüm pilleri aynı anda değiştirin ve farklı tip, marka veya kapasitede piller kullanmayın.

• Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Aşınmış cihaz başlığını kullanmayın. Hasarlı cihazları kullanmayın.

• Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.


Nasır ile ilgili genel bilgi

Özellikle ayaklarda oluşan nasır normaldir. Nasırın, ağrıya neden olacağından kalınlaşmaması ve sertleşmemesi gerekir.

Nasır oluşumu küçük veya yanlış ayakkabı, ayak bozuklukları veya aşırı kuru ciltlerde oluşur. Aşırı nasır oluşum nedenlerini önlemeye çalışın ve bu konuda doktorunuza tavsiye için danışın.

Aşırı nasır oluşumlarını önlemek için düzenli ayak banyosu ve hemen arkasından kremlemeniz önerilir. Uygun ayakkabı giymeye ve her gün ayakkabılarınızı değiştirmeye özen gösterin.

Pilleri yerleştirme

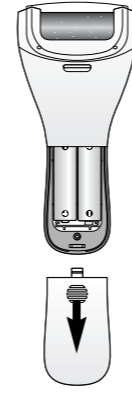

1. Arka taraftaki pil yuvası kapağın-daki tırtıklı alana basarak ve kapağı ok yönünde iterek pil yuvasını açın.

2. Pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin. Bu esnada kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.

3. Pili değiştirirken kapak duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturtulmalıdır. Pili değişimi sadece uçlar hiç hareket etmediğinde ya da çok yavaş hareket ettiğinde gereklidir.

Kullanım

Yaralanma - UYARISI
• Acı hissettiğinizde nasır temizleme işlemini hemen durdurun!
• Cihaz çalışır haldeyken uzun saçları hareketli başlıktan uzak tutun.

• Uygulama öncesinde ayaklarınızı yıkamayın. Yumuşak ciltte cihazın etkisi yoktur. Bu yüzden aleti daima kuru cilt üzerinde kullanın.
• Nasırı temizlerken toz halini alan derinin etrafa dağılması için işlemi bir altlık üzerinde gerçekleştirin.
• Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.

Başlıkları değiştirme

• Kalın nasır tabakaları için sert başlık.

• Yumuşak başlık ince nasır tabakası için ve gerekirse sert başlıkla kalın tabaka temizlendikten sonra rötuş için kullanılır.

1. Cihazı kapatın.
2. Her kullanımdan önce başlığın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Arızalı veya aşınmış başlıkları kullanmayın.

3. Başlığı çıkarmak için kilit açma tuşuna basın ve başlığı yukarıya doğru çekerek çıkarın.

4. Diğer başlığı takmak için olduğu gibi cihaza yerleştirin, duyulur ve hissedilir şekilde kilitlenene kadar bastırın.

Nasır temizleme

Yaralanma - UYARISI
• Dönen silindirin bir yerle temas etmemesine dikkat edin, aksi takdirde ısı oluşumuna yol açar.

1. İşlem görece cildinizi gerin.
2. Emniyet tuşuna basın ve açma/kapama tuşunu öne itin.

Başlıktaki törpü silindiri dönmeye başlar.

3. Törpü silindiri temizlemek istediğiniz nasırlı alanın üzerine dikkatli ve hafifçe bastırın.

4. Cihazı kapatmak için açma/kapama tuşunu başlangıç pozisyonuna geri çekin.

Uygulama sonrası

▷ İşlem görmüş cildi uygun kişisel bakım ürünüyle kremleyin. Cildi tahriş eden örn. deodorant gibi bakım ürünleri kullanmayın.
▷ Cihaz başlığını „Temizleme ve dezenfekte“ başlığında açıklandığı gibi temizleyin.

▷ Cihazı kullandıktan sonra başlık koruma kapağını takın.

Temizleme ve dezenfekte etme

▷ Başlıkları küçük bir fırça yardımıyla temizleyin.
▷ Gerekirse, cihazı suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.

▷ Başlıkları gerektiğinde eczadan temin edebileceğiniz etilalkol ile temizleyebilirsiniz.

İmha etme

İmha etme
Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model: 377 499
Piller: 2 adet LR6(AA)/1,5V
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

377 499